


新製品

## 分析前処理 溶解用黒鉛ルツボ (特許品)

本製品は、分析前処理にてサンプル溶解をする際に使用する黒鉛ルツボです。一般的にPtルツボを使用してアルカリ溶融しますが、特にセラミックス分野ではPtルツボと反応する材料も多く、合金化するリスクがあります。この溶解用黒鉛ルツボは合金化するリスクが無く、且つ低コストが最大の特徴です。また特殊な純化処理をする事で、コンタミネーションの影響が非常に少なく、精度の良い分析が行えます。

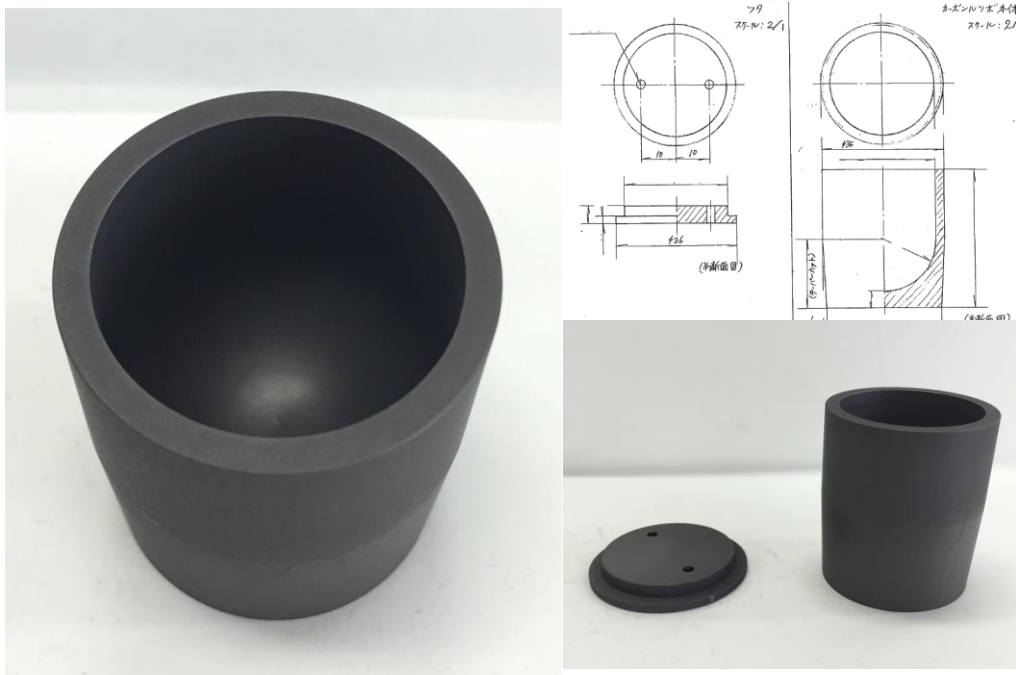

## —特徴—

- ◇アルカリ溶融する際の合金化のリスクが無い
- ◇ルツボ底面がアール形状でサンプル回収が良い
- ◇黒鉛材質により低コスト
- ◇繰り返し10回程度の使用が可能。(サンプルによる)
- ◇特殊な純化処理によりコンタミネーションが少ない。(不純物10ppm以下)

商品名	商品コード	仕様	梱包単位
溶解用黒鉛ルツボ	SS-RTB1	容量約30ml	5個/セット

お問合せ先

標準物質の専門商社 西進商事株式会社

HP: <http://www.seishin-syoji.co.jp> E-MAIL: info@seishin-syoji.co.jp

本社: 〒650-0047 神戸市中央区港島南町1-4-4

TEL078-303-3810(代) TEL078-303-3822