

## ◇従来品の特徴

ガラスアンプルは揮発しやすい物質の保存に適していますが、開封後の保存や定期的な使用を考えると使いづらい場合があります。スクリューキャップ式のバイアルでは、キャップのネジ溝から蒸発したり、コンタミが起こりやすいというリスクがあります。

## ◇CERTAN の利点


### 信頼の密閉性能

キャピラリー状の開口部とテフロンで内張りされたキャップが蒸発とコンタミのリスクを最小限に抑えます。

(充填および採取には針径 0.8mm 以下、長さ 70mm 以上のシリンジを使用)

### DURAN®ガラス製

実験台から落としても割れず、冷凍保存も可能です。  
(推奨温度: -30°C ~ +50°C)

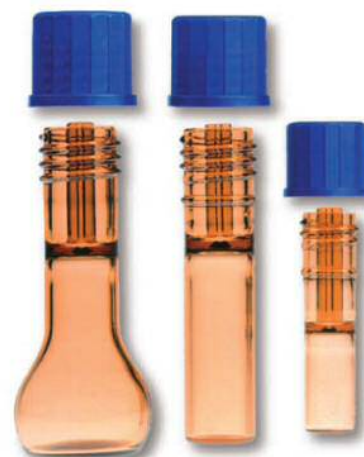

## ◇アプリケーション / ラインナップ

- ✚ ガラスアンプル入り標準物質の保存
- ✚ 揮発しやすい化合物の保存
- ✚ 検量線作成に用いる希釈した標準物質の保管
- ✚ 共同分析するサンプルを輸送する際の安全保管

品番	仕様	販売価格	
DE-CE 01	1.5ml, diam. × H 12mm × 50mm	¥ 2,100- /本	¥ 18,900- /10 本
DE-CE 05	4.5ml, diam. × H 16mm × 71mm	¥ 3,400- /本	¥ 10,800- / 5 本
DE-CE 10	10ml, diam. × H 30mm × 71mm	¥ 4,000- /本	¥ 12,500- / 5 本

※DE-CE 01 と DE-CE 05 には 10 本用の専用ラックがあります。


DE-MIG 13 (DE-CE 01 用), DE-MIG 17 (DE-CE 05 用) 各¥6,000-

## ◇CERTAN 洗浄キット

御使用前や溶液を入れ替える際にボトル内部を洗浄・乾燥させ、充填前のコンタミを防止できます。

※洗浄後に昇温乾燥させた場合、ボトルの褐色が消失する場合があります。

品番	販売価格
DE-WB 1000	¥18,000-

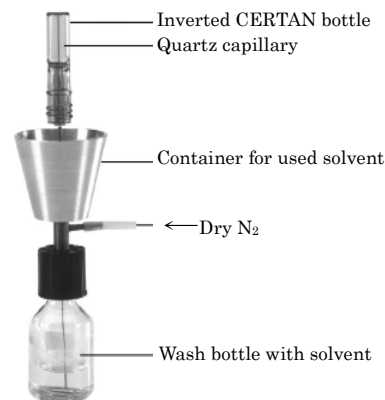

西進商事株式会社 英国 LGC 社 正規代理店 <http://www.seishin-syoji.co.jp>

神戸本社	TEL (078) 303-3810	FAX (078) 303-3822
東京支社	TEL (03) 3459-7491	FAX (03) 3459-7499
名古屋営業所	TEL (052) 586-4741	FAX (052) 586-4796
北海道営業所	TEL (011) 221-2171	FAX (011) 221-2010